

Коммерческое предложение

Предлагаем к поставке:

Наименование	Изображение
Тест-набор Rapid Test Strip for MILK-BTCS Экспресс-тест для выявления остаточного количества β-лактамов, тетрациклинов, стрептомицина и хлорамфеникола , 96 шт.	
Тест-набор Rapid Test Strip for MILK-QELTT Экспресс-тест для выявления остаточного количества фторхинолонов, эритромицина, линкомицина и макролидов , 96 шт.	
Тест-набор Rapid Test Strip for MILK – GKNS Экспресс-тест для выявления остаточного количества гентамицина, канамицина, неомицина и спектиномицин 96 шт.	
Тест-набор Rapid Test Strip for MILK – SAS Экспресс-тест для выявления остаточного количества сульфаниламидов , 96 шт.	
Тест-набор Rapid Test Strip for MILK – BCMNZ Экспресс-тест для выявления остаточного количества бацитрацина, колистина и метронидазола , 96 шт.	
Тест-набор Rapid Test Strip for MILK 16 in 1 – SABT+TEQL+SNKG+SMCF Экспресс-тест для выявления остаточного количества сульфаниламидов, альбендазола, бацитрацина, триметоприма, фторхинолона, тилозина, линкомицина, эритромицина, гентамицина, канамицина, неомицина, спектиномицина, спирамицина, монензина, колистина, флорфеникола , 24 шт.	
Считывающее устройство для тест-полосок, Kwinbon Gt-109 , новый ридер подходит для чтения Тест-кассет 16 в 1, и одинарных тест полосок.	

Тест-набор Rapid Test Strip for MILK-BTCS валидирован ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН и полностью соответствуют всем требованиям ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 033/2013, ГОСТ 32219 и ГОСТ 32254 и Решению №70 Коллегии ЕЭК от 26 июня 2023 г

Тест на антибиотики MILK обнаруживает остаточного количества антибиотиков: β-лактамов, тетрациклинов, стрептомицина и хлорамфеникола в сыром, пастеризованном, стерилизованном и предварительно восстановленном сухом молоке, а также сыворотке. Одна упаковка содержит 96 тест-полосок. Время анализа – **9 минут**.

Преимущества тестов MILK-BTCS:

- Позволяет одновременно определять присутствие в молоке β-лактамов, тетрациклинов, стрептомицина и хлорамфеникола.
- Быстрое получение результата.
- Высокая чувствительность.
- Высокая степень точности.
- Удобство при эксплуатации
- Приемлемая цена.
- Экологически чистая упаковка.

Принцип работы


MILK-BTCS тест для одновременного определения наличия в пробе молока молекул антибиотиков: β-лактамов, тетрациклинов, стрептомицина и хлорамфеникола. Благодаря ему производители молока могут значительно сократить финансовые расходы, так как он заменяет собой сразу четыре других теста. В процессе данного тестирования задействованы особые рецепторы и антитела.

Экспресс-тест удобен тем, что позволяет выполнять процедуру с высокой степенью точности, без каких-либо осложнений и значительных финансовых затрат. Широкое распространение тест-полоска MILK-BTCS получила в сфере сельского хозяйства. С ее помощью фермеры ежедневно выполняют проверку молока на наличие антибиотиков. Она используется также для серийного лабораторного анализа.


Расшифровка результата производится одним из двух способов:

- визуально;
- с применением считывающего оборудования.

Последовательность действий при работе с MILK-BTCS:

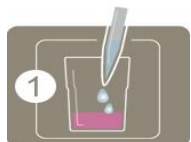


1. Смешать реагент с молоком в микролунке.

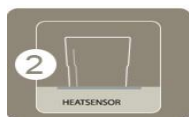

2. Поместить микролунку в инкубатор.



3. Закрыть крышку и нажать кнопку “Старт” инкубировать 3 мин

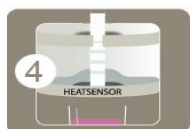

4. Поместить тест-полоску.



Проводить инкубацию на протяжении 6 минут.



5. Расшифровать полученный результат.